

THE VEGAS II

为了正确安全地使用本仪器
使用前请务必仔细阅读本说明书，并正确使用。

使用前请务必仔细阅读和遵守附有警告标识的注意事项。

警告标志与含意如下所示。

！危险 表示若误操作、极有可能造成人员死亡或重伤。

！警告 表示若误操作、可能会造成人员死亡或重伤。

！注意 表示若误操作、可能会造成人员受伤或物品损坏。

！危险

使用下述医用电子仪器的人请勿使用本仪器、否则可能导致错误运行。

- 起搏器等人体植入式医用电子仪器
- 人工心肺机等用于维持生命的电子仪器
- 心电图仪、输液器等佩戴型医用电子仪器

！警告

请避免让以下人群或在以下部位使用。

THE VEGAS II旨在美容，严禁用于其他目的。

- 伴有发烧症状的疾病、或血压异常时
- 患有感染性疾病、急性病的人
- 患有恶性肿瘤的人
- 过敏体质(过敏性皮炎等)、瘢痕疙瘩体质、肌肤脆弱的人
- 患有脸部黑皮病的人、或患有病态色斑、痣、疣的部位
- 接受过整形手术的部位或植入金属、塑料、硅胶的部位
- 患有光过敏症的人
- 孕妇、正在哺乳的人
- 因使用类固醇系激素类药物或化妆品而引发炎症的部位
- 患有血友病、出血性疾病的人
- 16岁以下的儿童请避免使用

！注意

- 生理期请勿使用。
- 伤口、炎症、发疹、荨麻疹等部位请勿使用。
- 身体不适时请勿使用。
- 请勿在醉酒状态下使用。
- 如果您正在接受医院治疗或服用药物，请在使用前咨询您的医生。
- 若您在过去出现过以下问题、请在使用前咨询您的医生。
 - 化学纤维引发的问题(接触性皮肤炎等)
 - 化妆品引发的问题(接触性皮肤炎等)
 - 使用美容仪护理引发的问题

为了正确安全地使用本仪器 THE VEGAS II

请务必按照记载的顺序使用,以免引发问题或导致事故。

⚠ 危险

请勿和其他美容仪器同时使用。

⚠ 警告

- ①严禁用于非指定部位或非美容目的。
- ②严禁在水分、湿气多的地方使用。
- ③严禁在USB接线、AC适配器上放置重物。
- ④请勿使用非规格记载的电源、电压。
- ⑤身体出现异常或皮肤感到异常时请立即停止使用,并咨询医生。
- ⑥地震或打雷时请将AC适配器从插座上拔除。
- ⑦LED亮灯时请勿窥视或直视光源。
- ⑧请勿修理、改造、拆卸THE VEGAS II。
- ⑨请勿将THE VEGAS II从高处摔落或强烈撞击。若不小心摔落或强烈撞击,请务必检查后再使用。
(LED的亮灯状态、有无裂缝等)


⚠ 注意

- ①请勿在浴室、盥洗台等湿度高的地方、或灰尘多的地方使用或保管。
- ②请勿在磁力强和有电波发出的地方使用或保管。
- ③请勿将水淋到或用湿手触摸本机、USB接线或AC适配器。
- ④将USB接线插入AC适配器、USB插孔或拔出时、请务必手持前端插头进行插拔。
手持USB接线插拔可能导致线被拉断。
- ⑤请勿损伤、强行弯曲、用力拉、捆扎USB接线。
- ⑥充电时请避免插座过载。
- ⑦长时间未使用本仪器时、使用前请务必确保本机能正常安全运作。
- ⑧请勿将其他产品的配件等用于本仪器。
- ⑨请使用干布擦拭本机脏污。严禁使用稀释液等药品类。
- ⑩使用THE VEGAS II时、请勿使用非专用美容液、以免引发问题。
- ⑪护理头有损伤的情况下请勿使用、以免伤害肌肤。
- ⑫请勿在同一部位过度使用、以免引发问题。
※1次的护理时间为整张脸10分钟(每周1次)
- ⑬使用THE VEGAS II时、请务必摘下贵金属类(耳环、项链、表等饰品类)、眼镜、隐形眼镜。
- ⑭使用THE VEGAS II后、请擦拭干净、放入专用化妆包、并保管在远离儿童、无阳光直射、不容易碰到水的地方。

万一发生问题或THE VEGAS II出现异常、请咨询购买店铺。自行判断非常危险。若觉得可能存在问题、请立即停止使用、并咨询购买店铺。

各部件的名称·规格·操作方法 THE VEGAS II

【产品构成】

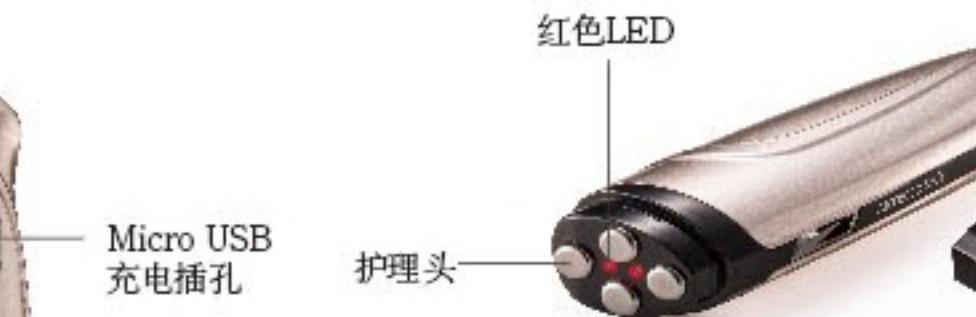

【配件】 · USB接线 · AC适配器 · 专用化妆包
· 使用说明书兼保修卡

規 格	
产品名	Miss Arrivo THE VEGAS II
电源规格	输入 AC100~240V 50/60Hz 输出DC 5V 1.0A
消耗电量	最大5W
输出频率	90kHz
LED波长	红620nm(±10nm)
外形	最大(H)160mm×(W)25mm×(D)35mm
重量	约72g
时长	10分钟
定价	59,800日元(不含税)

【THE VEGAS II操作方法】

※确认THE VEGAS II充满电。

(如未充电完成、请在充电完成后使用。)

※请勿一边充电一边使用。可能导致电池过早劣化。

①长按开关、打开电源。(进入1档状态)

②再次按下开关、可以切换档位。

※开始10分钟后电源自动切断。

※第一次使用时、请从1档开始尝试、然后调高至最舒适的档位进行护理。

按键次数	档位	弱 ↓ 强	使用中的档位
1次	电源打开/1档		●
2次	2档		● ●
3次	3档		● ● ●
4次	电源关闭		档位指示灯熄灭

THE VEGAS II 的机械音

使用时发出<哗>的声音。	开机后每1分钟响1次。 停止时发出<哔哔哔>的声音后停止。
--------------	----------------------------------

◆关于充电

充电时、充电指示灯(红色)亮灯。充电结束后、充电指示灯(红色)熄灭。

◆护理前

- ①请先卸妆洁面、在肌肤没有化妆品和皮脂等附着的清洁状态下使用。
 ②请摘下项链、戒指等饰品以及身上佩戴的所有贵金属类。

◆护理时

- ①在护理部位涂抹专用美容液。(参照美容液涂抹方法)
 ※请让护理部位处于涂抹了专用美容液的湿润状态。
 ②护理频率为每周1次、每次10分钟。
 ③将4个护理头完全紧贴肌肤、慢慢推动。

◆护理结束后

- ①护理结束后、使残留在肌肤上的美容液渗透。之后进行日常护肤。
 ②请用干布擦拭使用后的THE VEGAS II的脏污、保管在专用化妆包中。

USE MANUAL 脸部护理方法

THE VEGAS II 专用美容液



THE VEGAS

PE THE VEGAS

(保湿美容液)

30mL 8000日元(不含税)

9大无添加配方

无合成香料

无合成色素

无防腐剂

无酒精

无矿物油


无油

无石油系界面活性剂

无合成抗氧化剂

无紫外线吸收剂

美容液涂抹方法

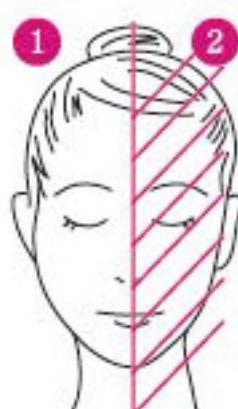

护理时、不要一次性将美容液涂满整张脸、而是将脸部分成左右2个区、依序涂抹、护理。

※左侧图片为区分示例。

美容液使用注意事项

- 有伤口、肿块、湿疹、接触性皮肤炎、溃烂等肌肤异常时，请勿使用。
- 不适合肌肤时，或使用中出现泛红、肿块、发痒、刺激、脱色(白斑等)或发黑等异常时、请停止使用、并咨询皮肤科医生。
- 请注意不要入眼。不慎入眼的情况下、请立即用清水洗净。
- 请保管在远离幼儿的地方。
- 避免保管在阳光直射、高温高湿的地方。
- 使用后请将盖子盖严。
- 请勿用手、毛巾等其他物品碰触喷头前端。

保修卡承诺按使用说明书所记载的内容、自购买日起1年内进行无偿修理。自购买日起、万一在上述保修期内发生故障、请附上使用说明书兼保修卡、或保修卡页的复印件、委托购买店铺进行修理。

※若没有填写序列号、购买日、购买店铺名、顾客名、地址、电话号码、则不适用保修。请务必事先确认没有漏写。

※配件(USB接线、AC适配器、专用化妆包、使用说明书兼保修卡)不适用保修。

※保修卡序列号贴纸剥落时、不适用保修。

◆即使在保修期内,若属下列情况,也将作有偿修理处理。

- A. 保修卡的序列号贴纸剥落
- B. 本保修卡上没有填写序列号、购买日、购买店铺名、顾客名、地址、电话号码
- C. 运输、移动时发生摔落、水淹等因使用者的不当处理而引起的故障及损伤
- D. 火灾、天灾、异常电压而引起的损伤及故障
- E. 因连接其他仪器而导致本产品而引起的故障
- F. 使用非本产品附属专用USB接线、AC适配器而引起的故障
- G. 非本公司进行的修理、调整、改造
- H. 没有出示本保修卡
- I. 使用非本公司推荐的专用美容液而引起的故障

◆关于运

- a. 保修期内的往返运费都由本公司负担。
- b. 保修期外的往返运费都由顾客负担。

本保修卡遗失不补、请妥善保管。